

Allura II


Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Lit de soins, toutes fonctions
électriques, pour patients en
surcharge pondérale



Allura II - Lit de soins, toutes fonctions électriques, pour patients en surcharge pondérale

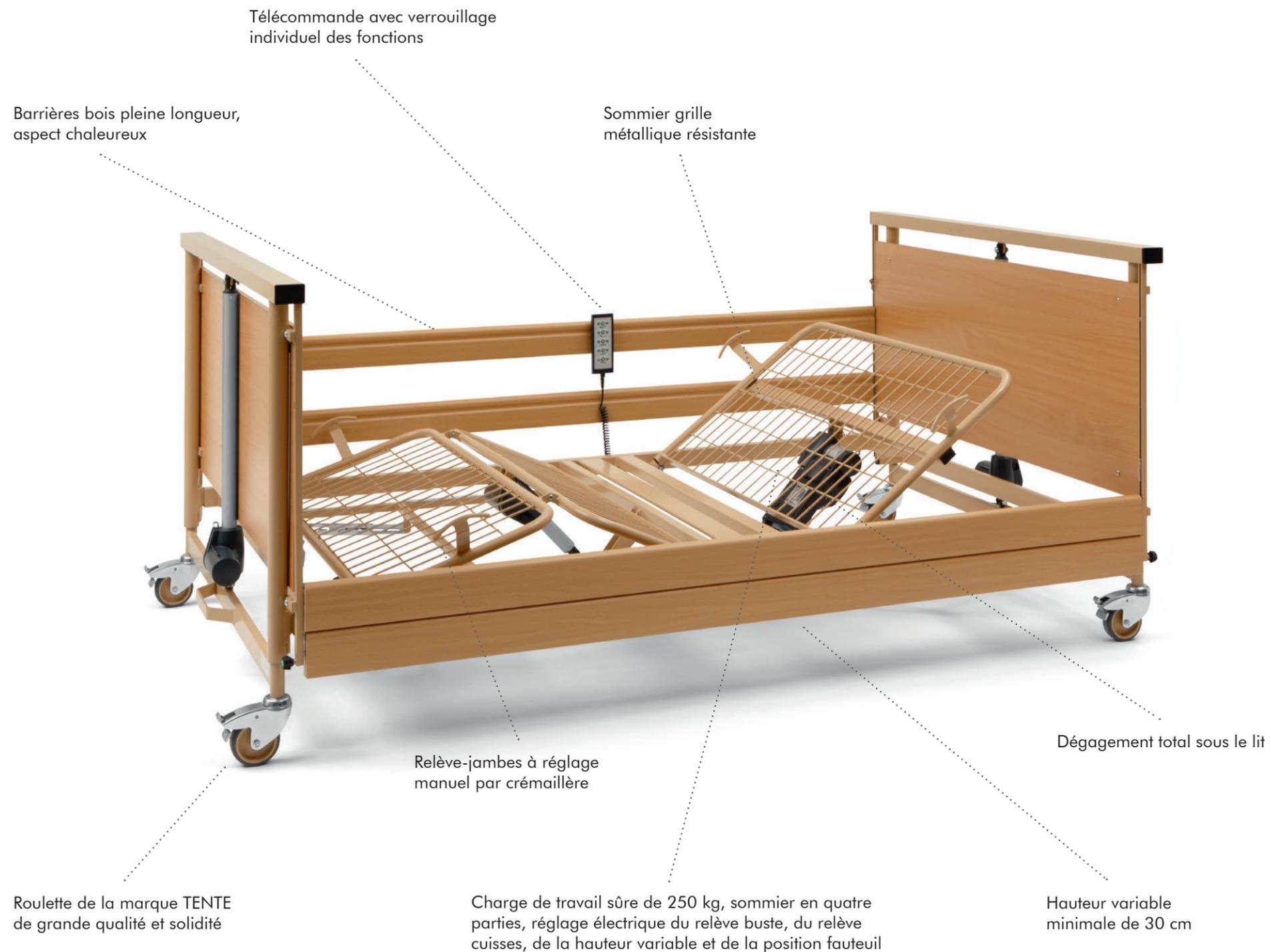

Avantages

Lit à colonnes

Dégagement total sous le lit. Aucun obstacle pour le passage des lève-patients ou tables à manger au lit. L'hygiène du sol est facilitée.

Barrières bois pleine longueur

Le bois apporte un apaisement, une esthétique chaleureuse et non hospitalière dans la chambre du patient. Les barrières procurent une protection sur toute la longueur du sommier.

Sommier 4 sections avec relèvement cuisses électrique

Indispensable pour empêcher le patient de glisser au pied du lit. Réduit le travail et la pénibilité pour les soignants et les aidants par la diminution du nombre de rehaussements à réaliser. Participe très favorablement à la prévention des escarres talonnières.

Position fauteuil

L'inclinaison électrique du sommier permet d'installer le patient en position assise, comme dans un fauteuil. La position assise apporte des bénéfices cliniques importants. Elle améliore les fonctions respiratoire, cardiaque, rénale, gastro-intestinale,... L'impact psychologique est aussi positif grâce à une interaction sociale plus naturelle et la réalisation plus aisée des activités.

Alimentation 24 V depuis la prise murale

Sécurité accrue grâce à l'absence de courant 230 V au contact du lit. Permet d'espacer à 2 ans la fréquence de la maintenance (voir manuel d'utilisation).

Hauteur basse 30 cm et charge de travail de 250kg

La charge de travail de 250 kg permet d'accueillir les patients en surcharge pondérale. La hauteur basse à 30 cm favorise leur autonomie en donnant les conditions optimales pour monter/descendre du lit.

Détails



Inclinaison du sommier pour obtenir la position fauteuil



Plage de réglage de 30 à 80 cm



Transformateur directement sur la prise murale. Pas de 230V au contact du lit



Télécommande avec fonction de verrouillage sélectif

Lit de soins **Allura II**

Modèle

- Sommier 4 sections métal, 90 x 200 cm (Allura II), 100 x 200 cm (Allura II 100), 120 x 200 cm (Allura II 120), hauteur variable env. 30-80 cm. Relève buste, relève cuisses et hauteur variable électriques
- Position fauteuil par basculement électrique du sommier
- Toutes les pièces métalliques sont traitées en peinture époxy, couleur topaze
- Inserts bois des parties tête et pied de lit en coloris hêtre naturel
- Télécommande avec fonction de verrouillage sélectif
- Charge de travail sûre de 250 kg
- Système de commande de 24 V


Fabriqué conformément à : DIN EN 60601-2-52/A1 : 2010



Sous réserve de modifications techniques. Édition 11, 2014 Version 1.6001.46

Accessoires

(livrables avec supplément)

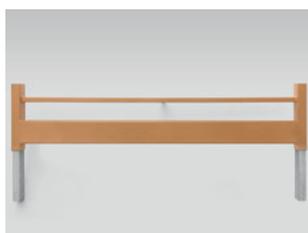

Rallonge de lit incluant rallonge de sommier et barrières rallongées (peut être monté ultérieurement)



Lampes de lecture



Protège barrière en simili cuir

Références et dimensions

- | | |
|------------|---|
| 15.5024.33 | Lit de soins Allura II (barrières bois pleine longueur), longueur 224 cm, largeur 101 cm |
| 15.5524.33 | Lit de soins Allura II 100 (barrières bois pleine longueur), longueur 224 cm, largeur 111 cm |
| 15.5724.33 | Lit de soins Allura II 120 (barrières bois pleine longueur), longueur 224 cm, largeur 131 cm |
| 19.1400.1 | Potence (comprise dans la livraison) |

Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage, Allemagne

Téléphone : +49 (0) 5232 9841 - 0

Fax : +49 (0) 5232 9841 - 41

E-mail : info@burmeier.com

www.burmeier.com